

## News Release ニュースリリース

日付：2022年9月2日


### DICOM ビューア NazcaView に計測結果のコピー貼り付け

### イメージ送りスクロールバーに再生ボタン・画像の縦 FIT 機能追加

医療情報システムを手掛ける株式会社アストロステージ（本社：東京都千代田区神田司町 2-8-1 PMO 神田司町 5F）は、これまでもご好評いただいております DICOM ビューア Nazca View（ナスカビュー）の機能追加を行いましたので発表いたします。


Nazca View（ナスカビュー）は多機能と使いやすさでご好評をいただいております、お客様のご要望にお応えして様々な機能の追加、改良を継続的に実施してまいりましたが、今回、計測のコピー貼り付け・画像の縦 FIT・イメージ送りスクロールバーに付けた再生ボタン機能を実現しました。

#### 「計測のコピー、貼り付け機能」

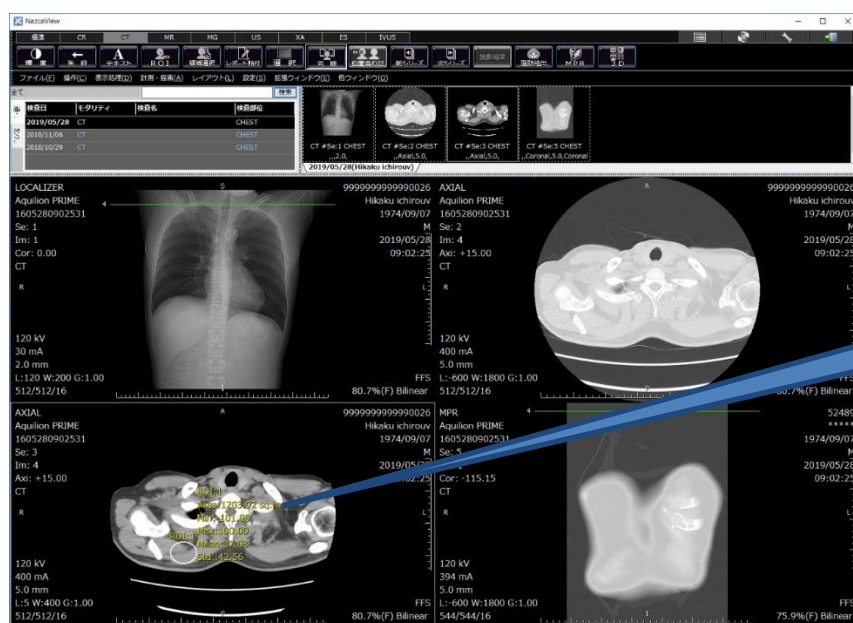

ROI を計測します（その他の計測でも機能します）」


ROI 計測や直線、確度等の計測でも大丈夫です。

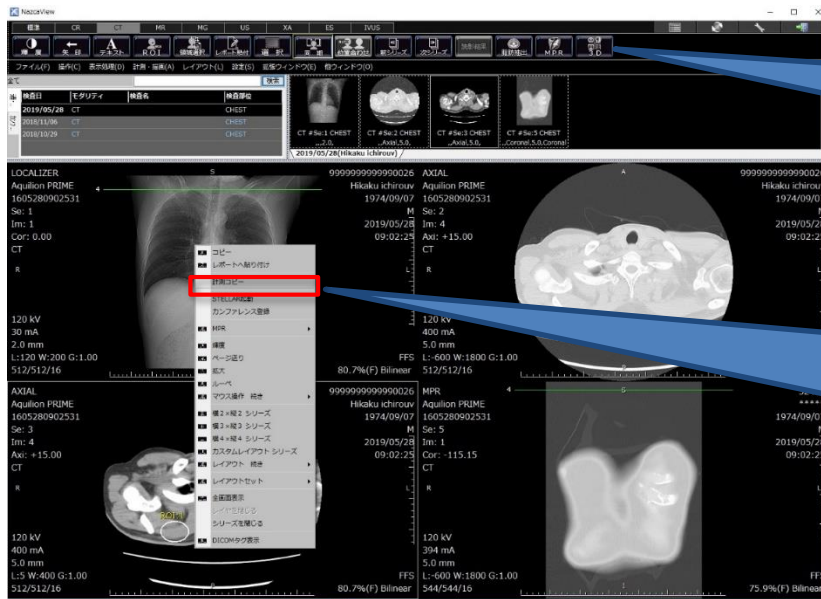

上部に機能アイコンをユーザーカスタマイズで敷設する事も出来ます。


右クリックメニューで計測コピーを選択します。画像上に計測がある場合、右クリックメニューに計測コピーのメニューが表示されます。

右クリックメニューで「計測コピー」を選択します

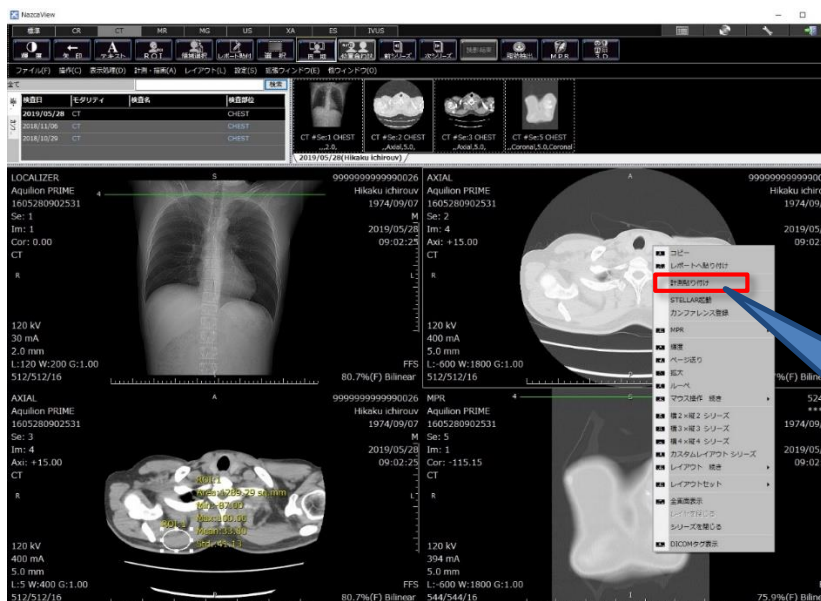

コピーした計測を貼り付けたい画像上で右クリックメニューの計測コピーを選択します。コピーした計測を保持している場合、右クリックメニューに計測貼り付けが表示されます。

コピーした計測を貼り付けたい画像上で、右クリックメニューの計測貼り付けを選択します

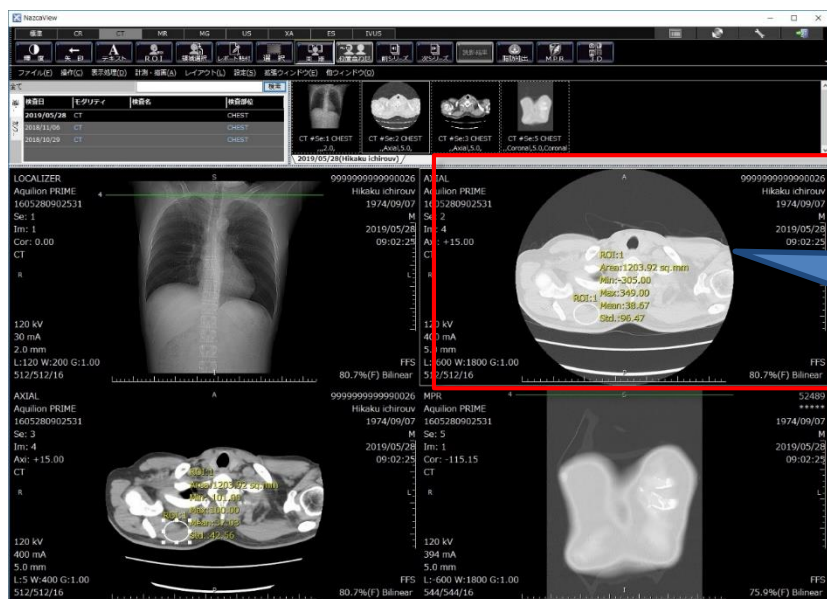

コピーした計測が貼りつきます


### 「スクロールバーに再生ボタンを追加」



マウスを所定の位置にあてると  
イメージ送りスクロールバーが表示されます。


スクロールバーの下部に  
再生ボタンが表示されます。  
表示有無はモダリティ毎の  
設定になっております。  
再生ボタンを押すと、  
画像が再生表示されます。  
※MPR は非対応です

再生ボタンを押すと、画像が再生表示されます  
(通常のシネモードの再生ボタンと同様の動作です)

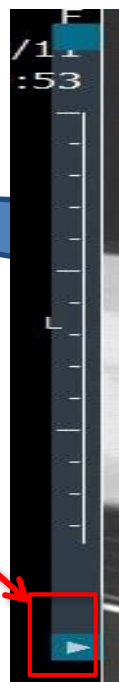

## 「画像の FIT 機能」


### ・通常の FIT の場合

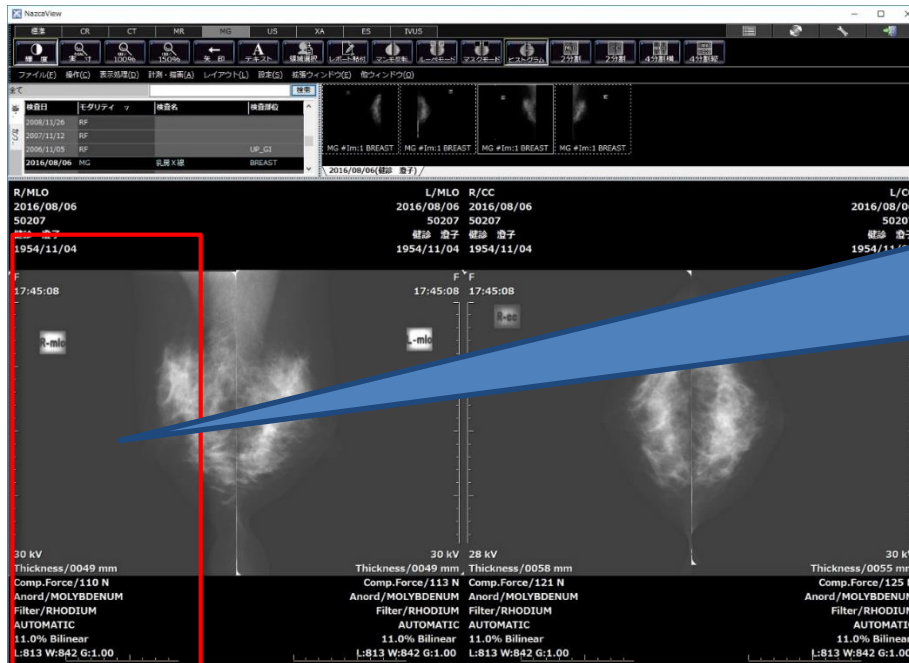

通常の FIT の場合、  
表示枠に画像の縦横両方が  
おさまるように表示させて  
います。

表示枠の縦横の小さい方に  
依存するので縦長の表示枠  
に対して正方形に近い画像  
だと、左図のように小さめ  
に表示されます。

### ・縦 FIT の場合

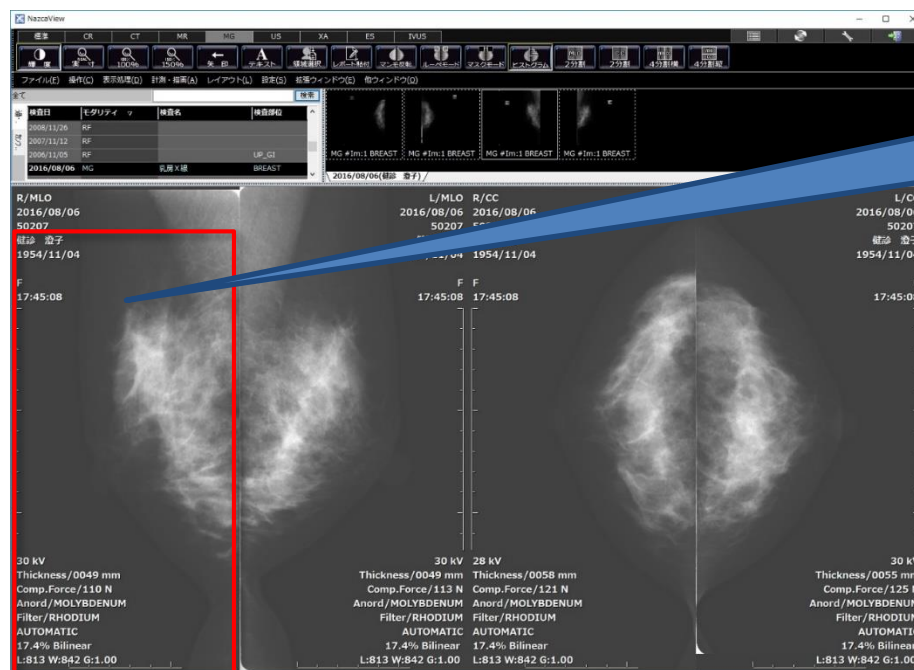

表示枠の縦サイズに、  
画像の縦サイズが FIT して  
おさまるように表示させま  
す。

上記機能は NazcaView のユーザー毎かつモダリティ毎に従来の通常の FIT と縦 FIT 及び横 FIT を設定して  
ご使用いただけます。

アストロステージは、今後もお客様の声に耳を傾け患者様の検査環境とお客様の作業環境を万全に整えるサポ  
ートを実現するため、これからも製品の改善、新たな機能の開発に力を注いでまいります。